

Lumba·Care -Martos-

APARATO
MASAJEADOR LUMBAR
OSTEOPÁTICO

DOSSIER INFORMATIVO



Lumba·Care -Martos-

Innovación en el Cuidado de la Espalda

Descubre el nuevo masajeador lumbar osteopático, diseñado para ayudar a aliviar la tensión muscular y mejorar la salud de la columna vertebral. Este innovador dispositivo combina calor terapéutico con un sistema de bombeo rítmico que imita la presión manual de un osteópata, **con una experiencia cómoda para el usuario.**

TERAPIA
OSTEOPÁTICA

DESCOMPRESIÓN VERTEBRAL

PRESIÓN CONTROLADA

CALOR TERAPÉUTICO

CALOR TERAPÉUTICO



Presión Controlada

A diferencia de otros masajeadores que actúan únicamente sobre la musculatura mediante vibraciones o movimientos rotatorios, este masajeador lumbar aplica una presión localizada y progresiva sobre la zona lumbar. Su acción está orientada a ayudar a reducir la presión mecánica acumulada, favorecer la descarga de los tejidos y contribuir al alivio de la sintomatología asociada a la sobrecarga lumbar, siempre de forma cómoda y sin causar dolor.


Movilidad Lumbar

Gracias a su sistema de bombeo rítmico y controlado, trabaja sobre el segmento lumbar mediante movimientos suaves y alternos. Esta acción favorece la movilidad de la región lumbar y contribuye a disminuir las molestias derivadas de la rigidez, la tensión y la sobrecarga lumbar, generando así una sensación de descompresión lumbar




Anclaje de 3 Puntos

Disco Antes

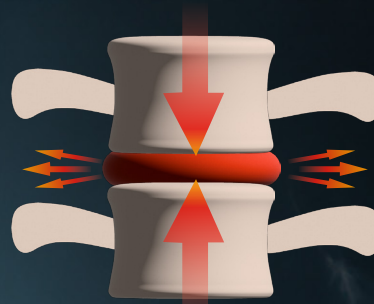


Disco Presionado
por las lumbares

Disco Después

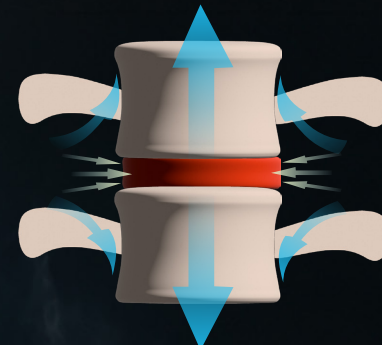

Disco recolocado
Después de la terapia
de descompresión

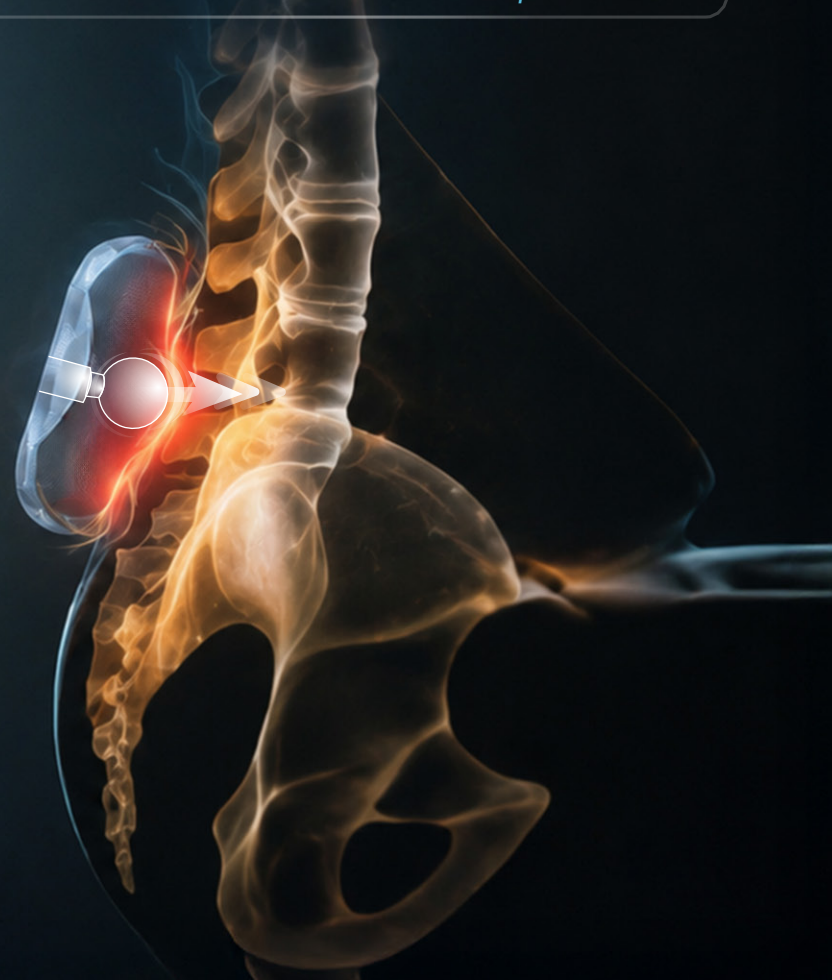

Lumba-Care


-Martos-

Vista Superior

Fácil de Usar y Mantener

El masajeador lumbar puede desmontarse fácilmente para su limpieza y almacenamiento. Su diseño compacto permite su uso diario en la comodidad del hogar o en centros especializados.

Vista Lateral

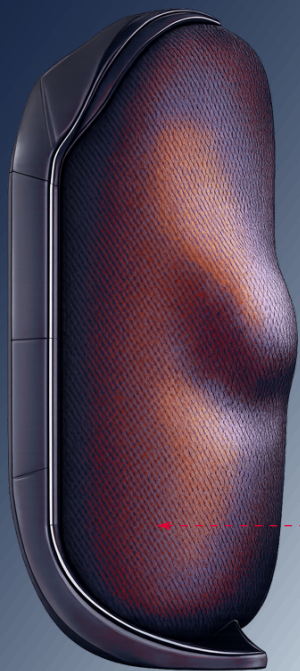

Malla Térmica



Malla elástica

- Se adapta al movimiento de las bolas masajeadoras

Malla Térmica

- Emisión de calor uniforme gracias a su sistema de fibra de carbono.

On / Off

3 Niveles de Calor

Bandas ajustables
Dos bandas ajustables mediante trabillas y velcro ajustan la unidad alrededor del abdomen.

Anclaje de 3 Puntos



Lumba·Care

-Martos-

MALLA TÉRMICA
ELÁSTICA

ESPUMA DE
ALTA DENSIDAD

ALMOHADILLA
ANATÓMICA

PISTÓN DE PRESIÓN

GUÍA LINEAL
DE PRECISIÓN

ESTRUCTURA
DE SOPORTE

Ante el dolor lumbar, los pistones actúan de forma suave y rítmica, suben y bajan de manera alterna con un recorrido de 2cm, generando una suave presión aplicada y una frecuencia de bombeo variable sobre vertebras lo que hace diferente a otros productos. La malla térmica proporciona el calor necesario para optimizar la experiencia, favoreciendo la relajación muscular y mejorando los efectos del masaje.

La bola masajeadora, gracias a su cámara de aire interna, absorbe el impacto y proporciona una amortiguación óptima. Esta tecnología permite una densidad adecuada para aplicar la presión justa, ofreciendo un masaje descompresor eficaz y confortable."



Lumba-Care -Martos-



Contacto:

Luis Martos

+34 610 46 42 45

www.lafabricadeinventos.com

info@lafabricadeinventos.com

Beneficios Clave

- ✓ Ayuda a reducir la sensación de rigidez lumbar: Reduce la tensión muscular y ligamentaria en la zona lumbar.
- ✓ Tecnología de Bombeo Rítmico: Movimientos postero-anteriores que favorecen la movilidad vertebral.
- ✓ Contribuye a la relajación muscular mediante calor terapéutico: Emisión de calor constante mediante hilos de fibra de carbono.
- ✓ Uso Doméstico y Profesional: Ideal para tratamientos en casa sin necesidad de camillas costosas y sin aplicar manipulaciones bruscas.
- ✓ Diseño Ergonómico y Ajustable: Se adapta a la zona lumbar mediante una faja de sujeción cómoda.



Lumba·Care

-Martos-



TRAYECTORIA PROFESIONAL

LUIS MARTOS VEGA

PERFIL PROFESIONAL

- ✓ Fisioterapeuta colegiado N° 29-1128 y D.O. Osteópata (MROE N° 473).
- ✓ Más de 27 años de experiencia clínica en patología musculoesquelética, dolor lumbar y terapia manual avanzada.
- ✓ Director sanitario y titular del Centro de Fisioterapia y Osteopatía Luis Martos, Málaga, desde 2003 (NICA 17308).
- ✓ Especialista en patología discal, lumbalgia compleja, biomecánica vertebral y rehabilitación funcional.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

- ✓ Desarrollador de modelos de utilidad registrados en la OEPM.
- ✓ Dispositivo de masaje lumbar osteopático – U202400142.
- ✓ Prenda de activación muscular postural – U202531688.
- ✓ Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Málaga.
- ✓ Osteópata D.O. – Escuela de Osteopatía de Madrid.
- ✓ Especialista Universitario en Terapias Manuales Osteopáticas.



27+
AÑOS DE
EXPERIENCIA



300+
OPINIONES
VERIFICADAS



ESPECIALISTA EN
DOLOR LUMBAR



INNOVACIÓN
SANITARIA
APLICADA

MOTIVACIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO

CARTA DE MOTIVACIÓN



La innovación en salud debe estar guiada por la experiencia clínica real, la ética profesional y el compromiso con el bienestar del paciente.

1. ORIGEN CLÍNICO

El proyecto nace tras más de dos décadas tratando miles de pacientes con lumbalgias, protrusiones, hernias discales y dolor musculoesquelético.

2. INNOVACIÓN DIFERENCIAL

LUMBA CARE MARTOS – modelo de utilidad U202400142.
Diseñado para actuar sobre el segmento vertebral lumbar.
Movimiento de bombeo postero-anterior inspirado en técnicas osteopáticas reales.
Integra calor terapéutico y alivio lumbar descompresivo.

3. OBJETIVO

Aportar una herramienta útil, segura y accesible que complemente los tratamientos conservadores y mejore la calidad de vida de las personas con dolor lumbar recurrente.

4. COMPROMISO Y PROYECCIÓN

Desarrollo y consolidación del proyecto con base clínica y credibilidad profesional.
Visión de crecimiento dentro del sector wellness terapéutico premium.
Innovación responsable, accesible y orientada al bienestar lumbar.

EXPERIENCIA
CLÍNICA REAL

ÉTICA
PROFESIONAL

INNOVACIÓN
TERAPÉUTICA

BIENESTAR DEL
PACIENTE